

SHOWCASE

Aligner - Workflow

Aligner-Produktion auf einem neuen Level:
MultiSplint und ProSplint e3 für maximale Effizienz.

SILADENT





Am effizientesten arbeitet der MultiSplint mit den großen 428mm Folien.



Einfache Auswahl der hinterlegten Materialparameter



DO NOT COVER

Materialeinstellungen

Folidur Align_1
Custom

Temp. 195°C

Druck 50psi

Power 100%

Heat on 0psi

Soak time 0s

Form time 40s

Cool time 70s

material bearbeiten

fortsetzen

Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet volle Kontrolle über alle Strategien und Parameter.



Die Modelle werden im großen Arbeitsbereich platziert.



Alternativ lassen sich durch den 7-Shot Adapter auch herkömmliche Folien in den Formaten 120 + 125 mm verwenden.



Während des Tiefziehvorgangs zeigt das Display den aktuellen Fortschritt.




Das fertige Ergebnis kann entnommen werden.

Um anschließend mit der ProSplint e3 weiterzuarbeiten, drückt man die Modelle bereits mit dem passenden Sockel.



Die 428 mm Folien verfügen neben der Isolierfolie auch über eine matte Schutzfolie.

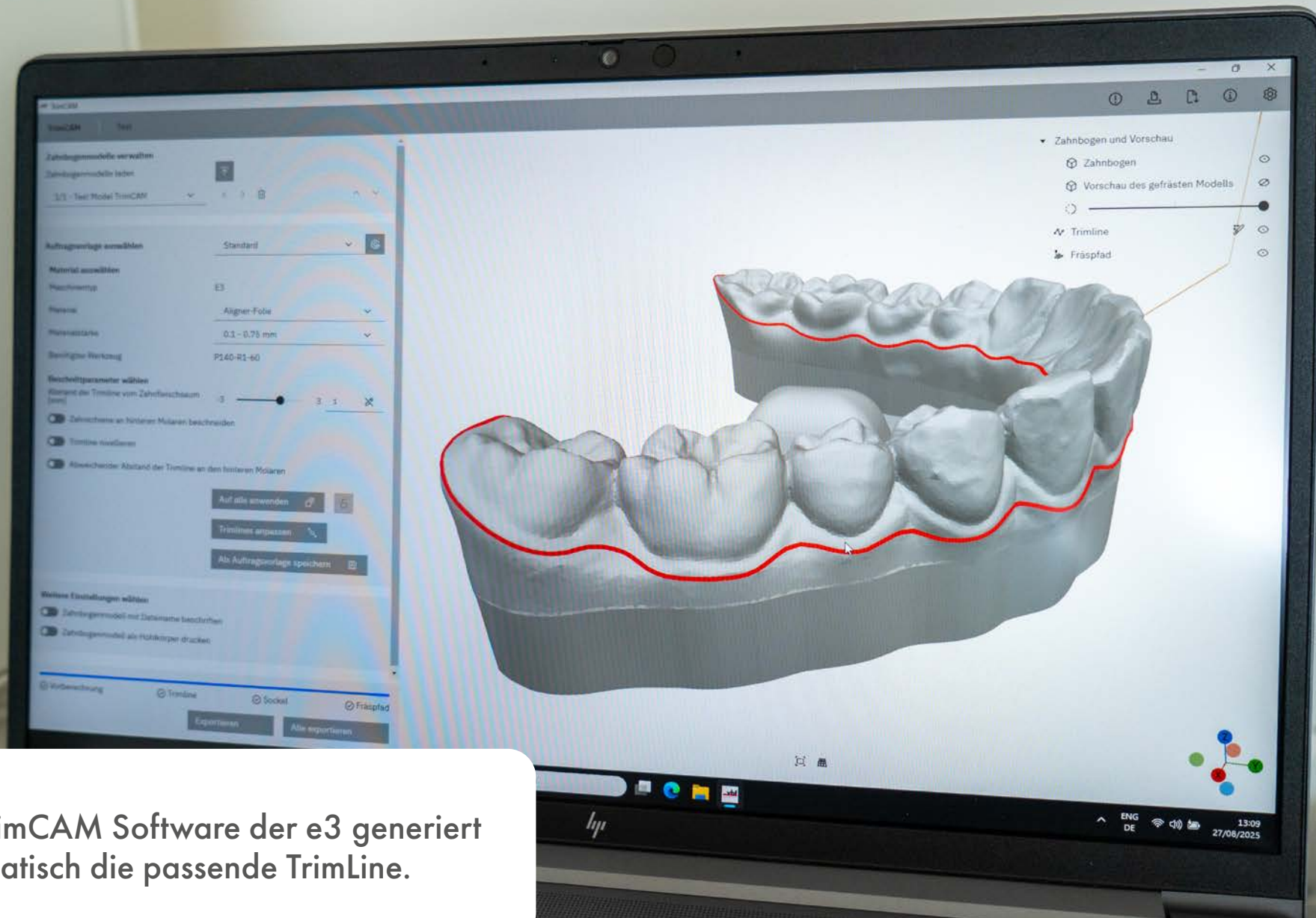

Die TrimCAM Software der e3 generiert automatisch die passende TrimLine.



In weniger als 60 Sekunden wird eine Schiene vom Modell gefräst.

LOT / 11392



Durch das innovative Zusammenspiel aus MultiSplint und e3 lassen sich alle Arten von Schienen mit großer Effizienz und hoher Prozesssicherheit herstellen.

Wir beraten Sie gern!

mike.schuhmann@siladent.de

(05321) 37 79 -227



Unkompliziert via
WhatsApp anfragen